


# Handhabung des Dreikammerbeutels

## 1. Entfernen des Umbeutels

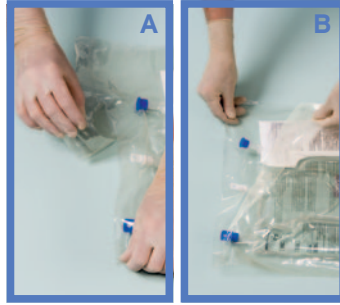


- Zum Entfernen des Umbeutels den Beutel waagrecht legen und an einer der Einrisskerben entlang des oberen Randes öffnen (A)
- Rand an der Längsseite aufreissen, Umbeutel abziehen und diesen zusammen mit dem Sauerstoffabsorber entsorgen (B)

## 2. Mischen



- Beutel auf eine flache Oberfläche legen
- Den Beutel mit Druck von der Griffseite her eng aufrollen, bis sich die vertikalen Peel-Nähte öffnen
- Durch mehrmaliges Drehen den Inhalt der drei Kammern mischen, bis sich die Komponenten gründlich durchmischt haben

## 3. Fertigstellen der Infusionslösung

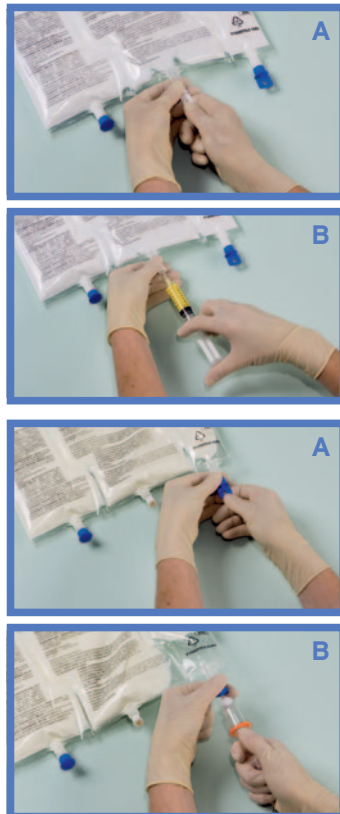

- Direkt vor Injektion von Additiven die weisse Verschlusskappe mit dem nach oben gerichteten Pfeil am Zuspritzport abbrechen (A)
- Zuspritzport an der Fingerführung festhalten. Injektionsnadel durch die Mitte des Zuspritzports komplett einführen und die Additiva injizieren (B)
- Den Beutelinhalt nach Zugabe jedes Zusatzes durch mehrmaliges Drehen des Beutels gründlich durchmischen
- Direkt vor Einführen des Infusionsbestecks die blaue Verschlusskappe mit dem nach unten gerichteten Pfeil am Infusionsport abbrechen (A)
- Ein unbelüftetes Infusionsbesteck benutzen oder ggf. die Belüftungskammer schliessen
- Infusionsport an der Fingerführung festhalten
- Spike durch den Infusionsport einführen. Um den Spike sicher zu fixieren, muss er vollständig in den Infusionsport eingeführt werden (B)

Maximale Haltbarkeit nach dem Öffnen und Durchmischen des Dreikammerbeutels - **ohne Zumischung von Additiven** - 6 Tage im Kühlschrank (2 - 8 °C). Anschliessende Infusionsdauer von bis zu 48 Stunden bei Raumtemperatur ( $\leq 25$  °C).



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

InfoLine 0800 800 877  
InfoMail@fresenius-kabi.com

Fresenius Kabi (Schweiz) AG  
Spichermatt 30  
CH-6371 Stans  
Telefon 041 619 50 50  
Telefax 041 619 50 80  
www.fresenius.ch